

How to Collect Cheek Cell Samples

Thank you for agreeing to provide cheek cell samples. To collect the samples, we have included:

- Consent forms
- Cheek cell brushes inside colored envelopes (One colored envelope per person.
Two brushes inside each colored envelope.)
- Postage-paid mailing envelope


Please read the following directions before you start collecting the cheek cell samples.

1

Read and sign the enclosed consent forms.


2

Starting with the red envelope labeled MOTHER, take out one cheek cell brush wrapper. Peel the white part of the wrapper down to where you see 3 stars (★☆☆). Take the brush out of the wrapper. Be sure **NOT** to touch the brush end. Keep the wrapper; you will need it in step 4.

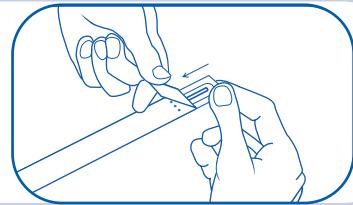


3

Place the brush inside your mouth, against the inside of your cheek. Rub the brush **firmly** up and down along the inside of your cheek **10 times**. Roll the brush on its other side and rub **firmly** up and down **10 more times** in the same area inside your cheek.

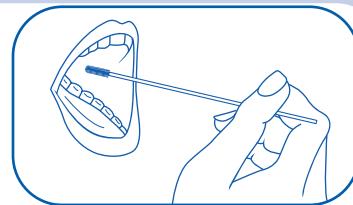

4

Put the brush back into the wrapper with the brush end first. Do not re-use this brush on another person.

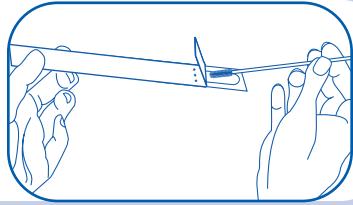

5

Take out the second wrapper from the envelope labeled MOTHER. Repeat steps 2-4 with the second wrapper and brush. This time, use the brush on your other cheek.

6

Once you have put the brush back into its wrapper, put both wrappers back into the red envelope labeled MOTHER. Close the envelope with the clear seal. Write the **date** the samples were collected on the envelope.

7

After collecting your cheek cell samples, follow steps 2-6 to collect cheek cell samples from the other identified family members.

8

Place all colored envelopes and **signed** consent forms into the big, postage-paid mailing envelope. Securely seal the envelope and return it to us by U.S. mail **as soon as possible**.

If you have any questions or problems, please call 404-498-4315.

Thank you!

Instrucciones Para Obtener Células De La Mejilla

Gracias por aceptar a entregarnos las muestras de células de la mejilla. Incluimos lo siguiente para sacar las muestras:

- Formas de consentimiento
- Cepillos dentro de sobres de colores (2 cepillos dentro de cada sobre de color. Un sobre de color para cada persona.)
- Sobre de correo pagado


Favor de leer las siguientes instrucciones antes de comenzar a sacar las muestras.

1

Lea y firme las formas de consentimiento.


2

Comenzando con el sobre rojo marcado MADRE, saque la envoltura de un cepillo. Quite la parte blanca de la envoltura hasta donde vea 3 estrellas (☆☆☆). Saque el cepillo de la envoltura. Asegure de **NO** tocar el lado del cepillo. Guarde la envoltura, la necesitará en el paso 4.

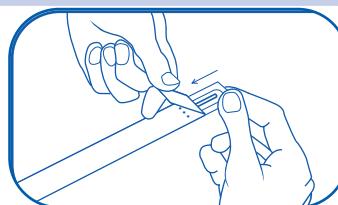


3

Coloque el cepillo dentro de su boca contra la parte interior de su mejilla. Frote el cepillo **firmemente** de arriba abajo por el costado de la parte interior de una mejilla **10 veces**. Gire el cepillo para que este quede del otro lado y frote **firmemente** de arriba abajo por el costado interior de la misma mejilla **10 veces más**.

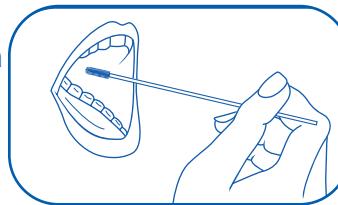

4

Ponga el cepillo dentro de la envoltura con la punta del cepillo primero. No vuelva a usar este cepillo en otra persona.

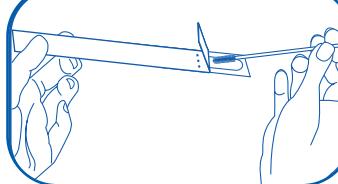

5

Saque la segunda envoltura del sobre marcado MADRE. Repita los pasos 2 al 4 con la segunda envoltura y cepillo. Esta vez, use el cepillo en su otra mejilla.

6

Después de poner el cepillo dentro de la envoltura, ponga las dos envolturas dentro del sobre rojo marcado MADRE. Cierre el sobre con el sello transparente. Escriba la **fecha** en el sobre cuando las muestras fueron obtenidas.

7

Después de obtener sus muestras de células de la mejilla, siga los pasos 2 al 6 para sacar las muestras de células de los otros miembros de la familia que fueron indicados.

8

Ponga los sobres de colores y las formas de consentimiento **firmadas** en el sobre grande de correo pagado. Asegure que esté bien cerrado el sobre y envíelo por correo (U.S. Mail) **lo más pronto posible**.

Si tiene alguna pregunta o problema, por favor llame al 404-498-4315.

¡Muchas Gracias!